

### 3. iPad®-Apps in der Unterstützten Kommunikation

Durch die Auswahl eines Buchstabens öffnet sich eine Seite, auf der direkt wichtigste Worte mit diesem Anfangsbuchstaben sowie mögliche nächste Buchstaben zur Verfügung stehen. Die Symbolfelder sind dabei alphabetisch sortiert.



© Tobii Dynavox LLC  
Symbolfelder und weitere Buchstaben nach Auswahl des Buchstabens W

Über das „Kommentare“-Feld in der linken Spalte wird eine Seite mit Kommentaren, Fragewörtern und gesprächssteuernden Phrasen geöffnet, die außerdem weitere Unterseiten anbietet.



© Tobii Dynavox LLC  
Kommentare

Ein weiterer Zugang zum Vokabular wird über das „Themen“-Feld in der linken Spalte ermöglicht. Pragmatisches Vokabular für verschiedene alltägliche Situationen ist bereits vorbereitet und kann durch individuell bedeutsame Themen ergänzt werden.

## 4. Zubehör

eine iPad®-Universalhalterung mit Kameragewinde. Zu beachten ist dabei, dass die Halterung auch die Aufnahme eines iPads® mit Hülle ermöglicht.



Manfrotto-Saugnapfhalterung



ChargerCity



Flexzi



MagicArm von Manfrotto

### Fazit

Es gibt eine Auswahl guter und sinnvoller Halterungen für ein iPad®. Bei besonderen Fragestellungen benötigt man aber dennoch Beratung und Unterstützung durch eine UK-Beratungsstelle oder durch eine Hilfsmittelfirma.

### 4.3. Unterstützung der direkten Ansteuerung des Displays

Es gibt Situationen, in denen Nutzer zwar das iPad® direkt ansteuern können, jedoch aufgrund motorischer Unsicherheiten nicht immer das richtige Feld treffen. Mögliche Ursachen können sein, dass ein Finger nicht isoliert bewegt werden kann oder dass aufgrund einer Hypotonie der Muskulatur nicht mit einem Finger gezeigt wird. Hier können unterschiedliche einfache Hilfen unterstützen.

#### 4.3.1. Tabletstifte

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Tabletstifte, die beim Ansteuern des Displays unterstützen können. Das Angebot umfasst die klassischen Eingabestifte, geht über spezielle Stifte für Kinderhände bis zu speziellen Stiften, die motorische Probleme ausgleichen helfen. Das Angebot an Kinderstiften ändert sich permanent, sodass es problematisch ist, hierzu Empfehlungen auszusprechen. Generell lässt sich aber zu den Eingabestiften sagen, dass es sehr wichtig ist, dass die Oberflächenspannung der Haut auf das Display umgeleitet wird.




Verschiedene Tabletstifte für Kinder

Bei den speziellen Stiften für Menschen mit motorischen Problemen sind die Angebote von Ivo Beckers, der mit seinem Shop „shapedad“ auf der Plattform Etsy spezielle Ansteuerungshilfen für das iPad® anbietet.

## 6. Tipps und Tricks

Es gibt die Option „Bildschirminhalt sprechen“, die unter der Sprachausgabe zu aktivieren ist. Diese Bedienungshilfe ist aber relativ schwer zu aktivieren, weil man mit zwei Fingern vom oberen Bildschirmrand nach unten streichen muss, was eine größere motorische Herausforderung darstellt. Zudem gibt es relativ wenige Situationen, in denen man sich den ganzen Bildschirminhalt vorlesen lassen möchte.

Es findet sich noch eine interessante Bedienungshilfe unter der Sprachausgabe – unter „Aussprache“ kann man Wörter eingeben, die die Sprachausgabe nicht richtig ausspricht. Eventuell ist das spannend bei Namen, die von der Sprachausgabe falsch ausgesprochen werden.

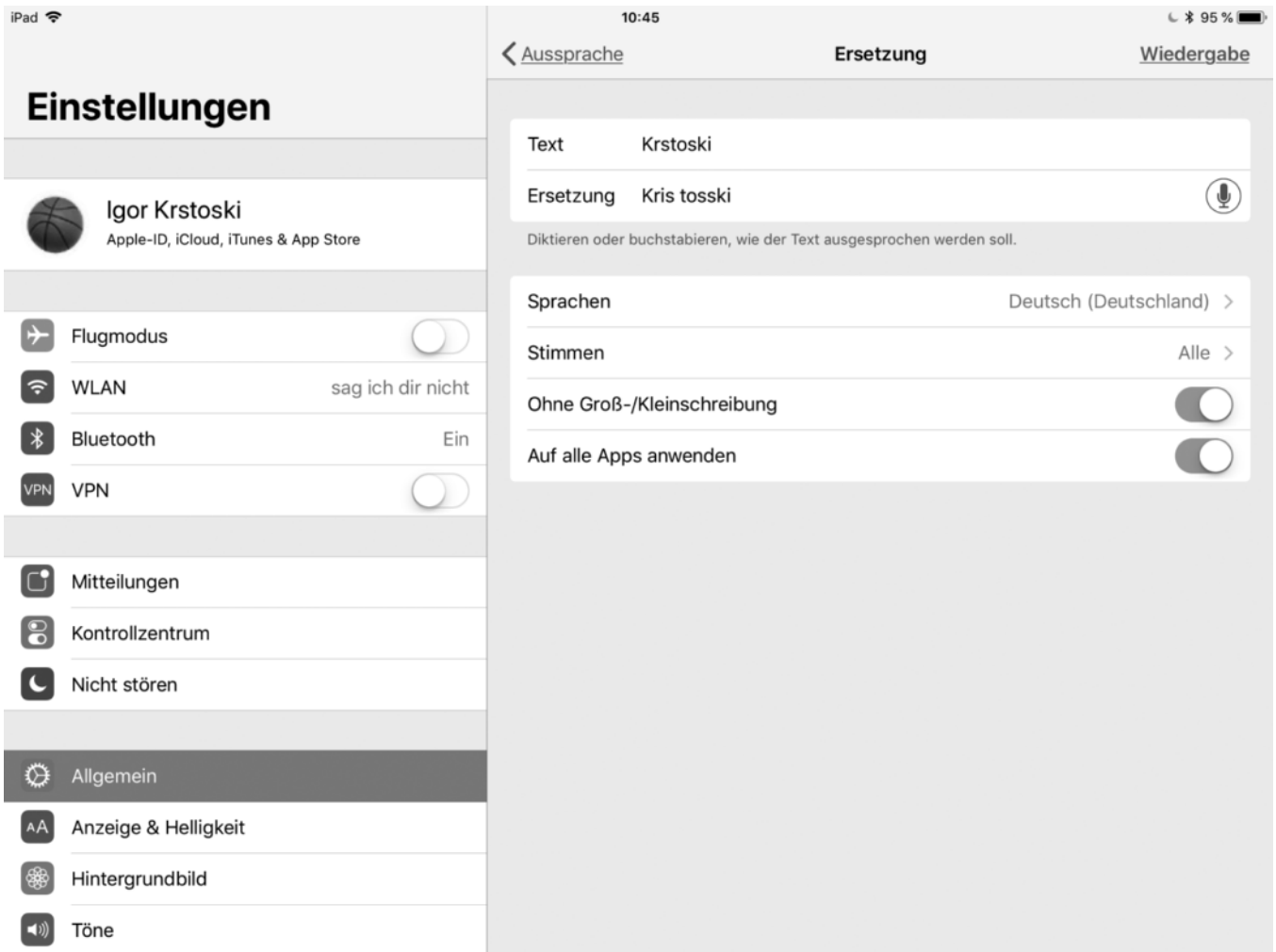

*Anpassung der Aussprache – siehe am Beispiel Krstoski*

### 6.3.2. Schaltersteuerung

Eine weitere spannende Bedienungshilfe, die Apple® in iOS® gepflegt hat, ist die „Schaltersteuerung“. Sie kann unter „Allgemein“, „Bedienungshilfen“ unter der Überschrift „Interaktion“ aktiviert werden.